

Panasonic®

Instrucțiuni de utilizare



(Uz casnic) Epilator IPL


Model Nr. ES-WH80



CE

Română5

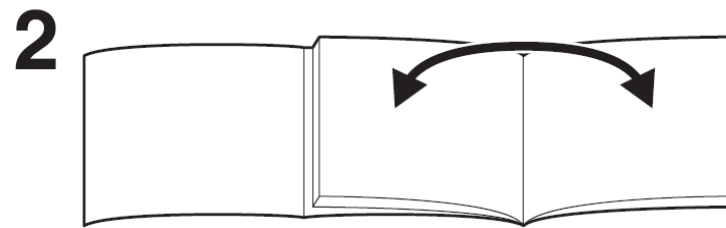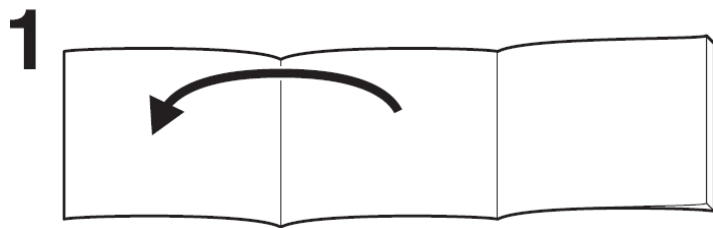

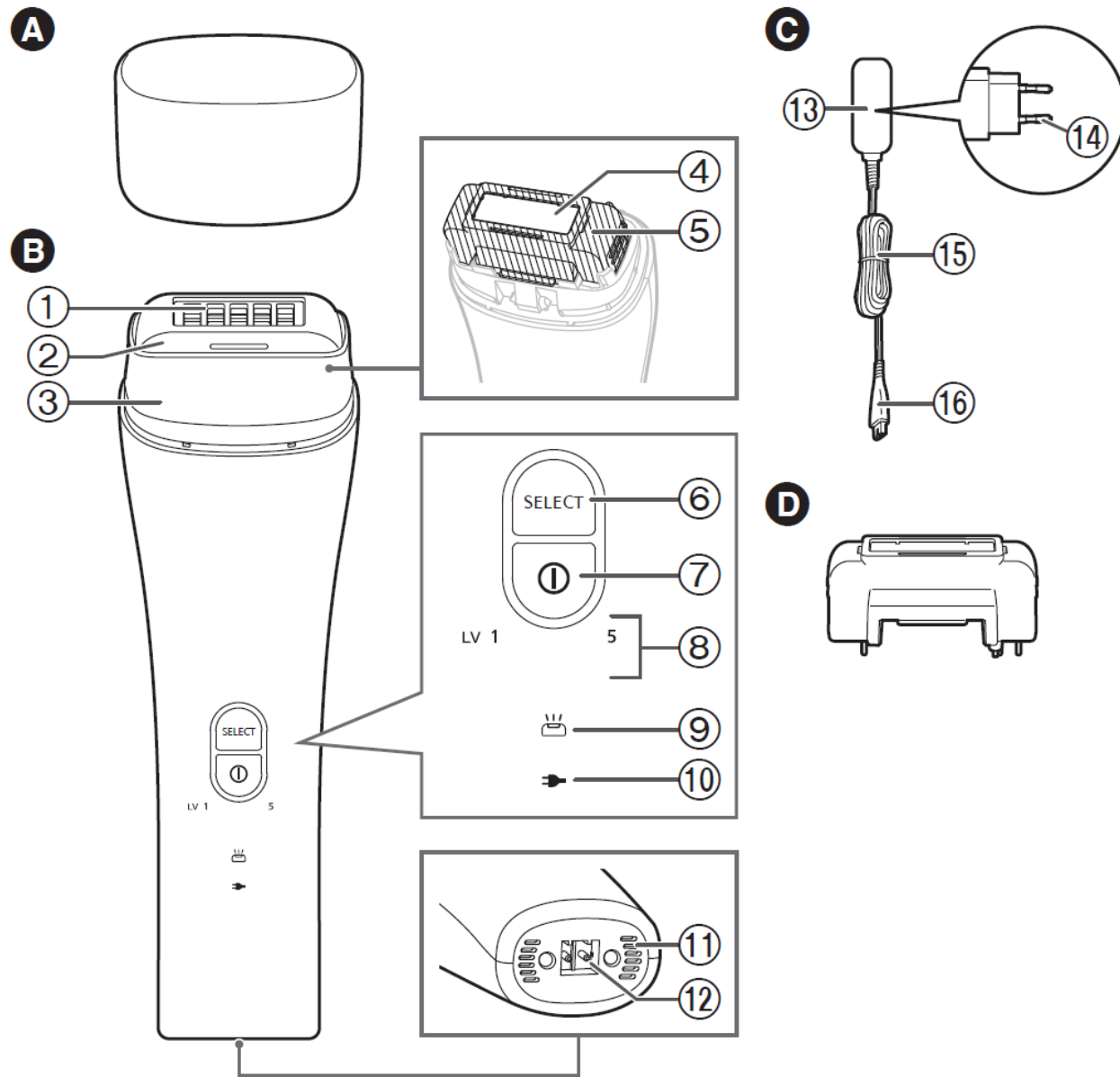

Panasonic®

Instrucțiuni de utilizare

(Uz casnic) Epilator IPL

Model Nr. ES-WH80

Cuprins

Măsuri de siguranță	7	Pentru o piele sănătoasă.....	16
Destinație de utilizare	11	Indicație lampă	16
Identificarea elementelor	12	Curățarea	18
Zone de tratament	12	Înlocuirea cartușului lămpii	19
Ghid pentru frecvența și durata tratamentului	13	Întrebări și răspunsuri.....	20
Încărcarea	13	Ghid de rezolvare a problemelor	21
Înainte de utilizare	14	Durata de viață a bateriei	22
La utilizarea aparatului pentru prima dată	14	Scoaterea bateriilor reîncărcabile.....	22
Mod de utilizare	15	Specificații	23

Vă mulțumim că ați cumpărat acest produs Panasonic.

Înainte de a opera aparatul, vă rugăm să citiți în întregime aceste instrucțiuni și să le păstrați pentru utilizări ulterioare.

Avertisment




- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de minim 8 ani și de persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență și cunoștințe, dacă au fost supravegheați sau instruiți în prealabil privind folosirea aparatului într-un mod sigur și dacă înțeleg pericolele implicate. Copii nu trebuie să se joace cu aparatul. Lucrările de curățare și întreținere nu vor fi efectuate de copii fără supraveghere.
- Cablul de alimentare nu poate fi înlocuit. În cazul în care cablul este deteriorat, adaptorul de alimentare trebuie eliminat la deșeuri.
- Păstrați aparatul uscat.
- Nu utilizați alte adaptoare în afară de adaptorul de alimentare furnizat.

Măsuri de siguranță



Pentru a reduce riscul de accidentare, pierderea vieții, electrocutare, incendiu și daune materiale, respectați întotdeauna următoarele măsuri de siguranță.

Explicarea simbolurilor

Următoarele simboluri sunt utilizate pentru a clasifica și descrie nivelul de pericol, accidentare și daune materiale cauzate atunci când notația nu este luată în considerare și aparatul este utilizat în mod necorespunzător.


 PERICOL	Denotă un potențial pericol care ar putea cauza accidente grave sau moartea.
 AVERTISMENT	Denotă un potențial pericol care ar putea cauza accidente grave sau moartea.
 ATENȚIE	Denotă un pericol care ar putea cauza accidente minore.


Următoarele simboluri sunt utilizate pentru a clasifica și descrie tipul de instrucțiuni ce trebuie urmate.


 Acest simbol este utilizat pentru a alerta utilizatorii cu privire la o procedură de operare specifică ce nu trebuie efectuată.
 Acest simbol este utilizat pentru a alerta utilizatorii cu privire la o procedură de operare specifică ce trebuie urmată pentru operarea în siguranță a dispozitivului.


AVERTISMENT


► Pentru a preveni probleme de piele sau sănătate

 **Persoanele care folosesc un dispozitiv electronic medical implantat, precum un stimulator cardiac, vor evita contactul dintre acest aparat și pielea în zona în care respectivul dispozitiv medical este implantat.**
– În caz contrar, pot fi cauzate accidentări sau alte afecțiuni.


 **A nu se utiliza în timpul sarcinii sau menstruației.**
– În caz contrar, pot apărea probleme ale pielii din cauza echilibrului hormonal instabil.

 **A nu se utiliza pe tatuaje.**
– În caz contrar, pot apărea cheloide cauzate de arsuri, roșeață sau alte iritații ale pielii.

 **Nu orientați fasciculul luminos spre ochi.**
– În caz contrar, pot apărea afecțiuni ale ochilor.

 **A se utiliza doar sub braț, pe brațe, picioare sau pe linia slipului.**
– În caz contrar, pot apărea arsuri sau alte iritații ale pielii.

► Sursă de alimentare

 **Nu conectați sau deconectați adaptorul la o priză de uz casnic cu mâinile ude.**
– Acest lucru ar putea provoca electrocutare sau accidentare.



AVERTISMENT

Nu deteriorați, modificați, îndoiiți forțat, întindeți sau răsuciți cablul. De asemenea, nu așezați niciun obiect greu pe cablu și nu îl prindeți.

Nu introduceți adaptorul de alimentare în apă și nu îl stropiți cu apă.



Nu amplasați adaptorul de alimentare pe sau lângă o chiuvetă sau cadă pline cu apă.

Nu utilizați aparatul dacă adaptorul de alimentare este deteriorat sau dacă fișa de alimentare se mișcă în priza de uz casnic.

– Acest lucru ar putea provoca electrocutare sau incendiu din cauza unui scurt-circuit.

Nu utilizați alte adaptoare în afară de adaptorul de alimentare furnizat. De asemenea, nu încărcați alte produse cu adaptorul de alimentare furnizat.



– Acest lucru ar putea provoca arsuri sau incendiu din cauza unui scurt-circuit.

Utilizați aparatul în așa fel încât să nu se depășească valorile nominale ale prizei sau instalației electrice de uz casnic.



– Depășirea valorilor nominale prin conectarea prea multor fișe la o singură priză de uz casnic poate cauza un incendiu din cauza supraîncălzirii.

Asigurați-vă întotdeauna că aparatul este operat cu o sursă de alimentare electrică conformă cu tensiunea nominală indicată pe adaptorul de alimentare.



Introduceți complet adaptorul sau fișa aparatului.

– Nerespectarea acestei instrucțiuni poate provoca incendii sau electrocutare.

Deconectați întotdeauna adaptorul de la priza de uz casnic atunci când îl curățați.



– Nerespectarea acestei instrucțiuni poate provoca șocuri electrice sau accidentări.

Curățați în mod regulat fișa de alimentare și fișa aparatului pentru a preveni acumularea prafului.



– Nerespectarea acestei instrucțiuni ar putea provoca un incendiu din cauza cedării izolației sub acțiunea umidității. Deconectați fișa și ștergeți-o cu o lavetă uscată.

► Acest aparat

Acest aparat are o baterie reîncărcabilă integrată. Nu o aruncați în flăcări și nu o expuneți la căldură. Nu o încărcați, utilizați sau lăsați la temperaturi ridicate.



– Acest lucru ar putea cauza supraîncălzirea, aprinderea sau explozia.

Nu depozitați aparatul la îndemâna copiilor. Nu le permiteți să îl utilizeze.



– În caz contrar, pot fi cauzate accidentări sau alte răniri.

Nu modificați sau reparați aparatul.



– Acest lucru ar putea provoca incendiu, electrocutare sau accidentare. Contactați un centru de service autorizat pentru reparații (schimbarea bateriei etc.)

Nu dezasamblați niciodată aparatul, cu excepția cazului în care îl depuneți la deșeuri.



– Acest lucru ar putea provoca incendiu, electrocutare sau accidentare.

Nu utilizați aparatul într-o baie sau într-un spațiu cu umiditate mare. De asemenea, nu îl așezați într-un loc în care se poate vărsa apă (cum ar fi partea de sus a unei măsuțe de toaletă).



– Acest lucru ar putea provoca electrocutare sau incendiu.

Nu introduceți aparatul în apă și nu-l stropiți.



– Acest lucru ar putea provoca electrocutare sau incendiu din cauza unui scurt-circuit.



AVERTISMENT

► În caz de funcționare anormală sau defecțiuni



Întrerupeți imediat utilizarea și decuplați adaptorul dacă apare o anomalie sau o defecțiune.


– Utilizarea în astfel de condiții ar putea provoca incendiu, electrocutare sau rănire.

<Cazuri de anomalii sau defecțiuni>


- Unitatea principală, adaptorul sau cablul sunt deformatate sau anormal de fierbinți.
- Unitatea principală, adaptorul sau cablul emană un miros de ars.
- Apare un sunet anormal în timpul utilizării sau încărcării unității principale, sau în timpul utilizării adaptorului sau cablului.
- Solicitați imediat inspecția sau repararea la un centru de service autorizat.

► Țineți cont, de asemenea, de următoarele măsuri de precauție

Nu îndepărtați cartușul lămpii cu excepția cazului în care acesta este înlocuit.

Nu atingeți zona  atunci când înlocuiți cartușul lămpii.

– Acest lucru ar putea provoca electrocutarea sau un incendiu din cauza unui scurt-circuit.

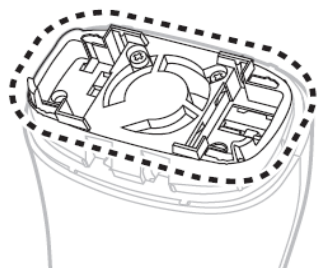

ATENȚIE

► Pentru a proteja pielea

Următoarele persoane nu trebuie să utilizeze aparatul:

- Persoane cu dermatită
- Persoane care suferă de dermatită atopică, iritații sau alte afecțiuni ale pielii
- Persoane cu diateză alergică sau piele sensibilă, ușor iritabilă la contactul cu produse cosmetice, haine, metale etc.

• Persoane cu piele sensibilă la lumina soarelui

A nu se utiliza în următoarele zone ale corpului:

- Pe piele bronzată
- Pe zone ale pielii de culoare neagră sau maro închis, de exemplu zone cu alunițe (Consultați fișa pentru "Tonuri de piele și păr adecvate").
- Zone cu cruste, urticarie, julituri, negi, acnee, cancer de piele, herpes (dermatofitoză), foliculită, piele iritată, mușcături de insecte, etc.

• Față și organe genitale

• Angiomă

• Zone cu operații chirurgicale cosmetice

A nu se utiliza în următoarele cazuri:

- Când nu vă simțiți bine sau când simțiți o anomalie pe piele sau în corp

Nu utilizați în mod repetat în aceeași zonă și nu utilizați epilatorul IPL mai mult de 3 ori pe săptămână.

– În caz contrar, pot apărea afecțiuni ale pielii, inflamații, sângerări, durere crescută sau alte probleme și simptome agravante.



Nu utilizați un cartuș de lampă fisurat.

– În caz contrar, pot apărea afecțiuni ale pielii.



ATENȚIE



Nu îndepărtați cadrul cu excepția cazului în care efectuați curățarea sau înlocuirea cartușului lămpii.
– În caz contrar, se poate produce rănirea pielii sau a degetelor.



A se utiliza doar de către persoane cu vârsta de peste 18 ani.
– În caz contrar, pot apărea afecțiuni sau inflamații ale pielii, sângerări sau durere crescută.



Înainte de utilizare, asigurați-vă că nu există deformări, fisuri sau deteriorări ale cadrului și ferestrei prin care este emis fasciculul luminos.
– În caz contrar, vă puteți răni pielea.



Persoanele cărora li se administrează medicație trebuie să consulte un dermatolog.
– Pielea poate deveni sensibilă la stimularea cu lumină, în funcție de tipul de medicație administrată și pot apărea probleme ale pielii.



Dacă apar inflamații (de exemplu, pielea devine roșie), opriți utilizarea aparatului și consultați un dermatolog dacă inflamația continuă chiar și după 2 zile.
– În caz contrar, simptomele se pot înrăutăți.

► Sursă de alimentare



Feriți fișa de alimentare sau fișa aparatului de contactul cu ace sau murdărie.
– Acest lucru ar putea provoca electrocutare sau incendiu din cauza unui scurt-circuit.



La depozitarea aparatului, nu înfășurați cablul în jurul adaptorului.
– Acest lucru ar putea provoca ruperea conductorului din cablu sub acțiunea sarcinii și ar putea provoca un incendiu din cauza unui scurt-circuit.



Deconectați adaptorul sau fișa aparatului ținând de adaptor sau fișă și nu de cablu.
– Deconectarea ținând de cablu poate cauza șocuri electrice sau răniri.



Deconectați adaptorul de la priza de uz casnic atunci când nu încărcați aparatul.
– Nerespectarea acestei instrucțiuni poate provoca electrocutare sau un incendiu din cauza unei scurgeri de electricitate rezultată din deteriorarea izolației.

► Acest aparat



A nu se utiliza pe piele umedă sau pe piele pe care a fost aplicată loțiune, cremă de ras sau alte produse.
– Acest lucru ar putea provoca electrocutare sau defecțiuni.



Nu scăpați aparatul pe jos și nu îl expuneți la șocuri.
– Acest lucru ar putea cauza răniri.



Nu îndepărtați cadrul imediat după utilizarea epilatorului IPL.
– În caz contrar, pot apărea arsuri, deoarece fereastra prin care este emis fasciculul luminos este fierbinte.

► Vă rugăm țineți cont de următoarele măsuri de precauție



A nu se utiliza pe haine sau părul de pe cap.
– Acest lucru ar putea provoca arsuri sau decolorări.

► Depunerea la deșeuri a bateriilor reîncărcabile



PERICOL

Bateria reîncărcabilă este destinată utilizării exclusiv cu acest aparat. Nu utilizați bateria cu alte produse. Nu încărcați bateria după ce a fost scoasă din produs.

- A nu se arunca în foc sau alte surse de căldură.
- A nu se lovi, dezasambla, modifica sau găuri cu un cui.
- Nu lăsați bornele pozitive și negative ale bateriei să intre în contact între ele prin intermediul obiectelor metalice.
- Nu purtați sau depozitați bateria împreună cu bijuterii metalice, precum coliere sau agrafe de prins părul.
- Nu încărcați, utilizați sau lăsați bateria în locuri expuse la temperaturi ridicate, precum lumina directă a soarelui sau lângă alte surse de căldură.
- Nu dezizolați tubul.
 - Acest lucru ar putea cauza supraîncălzirea, aprinderea sau explozia.



AVERTISMENT

- După scoaterea bateriei reîncărcabile, nu o lăsați la îndemâna copiilor sau bebelușilor.
- Bateria va provoca leziuni dacă este înghițită accidental. Într-un astfel de caz, consultați imediat medicul.



Dacă lichidul din baterie se scurge, efectuați următoarele proceduri. Nu atingeți bateria cu mâinile goale.

- Lichidul din baterie poate cauza orbire dacă intră în contact cu ochii.
Nu vă frecați la ochi. Spălați-vă imediat cu apă curată și consultați un medic.
- Lichidul din baterie poate cauza inflamații dacă intră în contact cu pielea sau hainele.
Spălați-vă imediat cu apă curată din abundență și consultați un medic.

Destinație de utilizare

- Folosiți epilatorul IPL doar după îndepărtarea părului în exces. Emiterea fasciculului luminos fără îndepărtarea părului poate duce la prinderea acestuia în dispozitivul de protecție sau în fereastra prin care este emis fasciculul luminos, iar resturile nu vor putea fi eliminate. Înainte de utilizare, ștergeți orice urme de apă sau transpirație din zona de tratament și orice fire de păr lipite de piele.
- Nu utilizați diluant, benzen, alcool etc. pentru a curăța aparatul. În caz contrar, pot apărea deteriorări, fisuri sau decolorări ale corpului principal. Ștergeți cu o cârpă uscată.
- Nu lăsați aparatul într-o zonă cu temperatură ridicată. Acest lucru ar putea cauza o defecțiune.

Identificarea elementelor

A Capac

B Corp principal

- ① Protecție (partea cu model grilă)
- ② Comutator fascicul luminos
- ③ Cadru
- ④ Fereastră fascicul luminos
- ⑤ Cartuș lampă
- ⑥ Comutator selector de nivel (fascicule luminoase)
- ⑦ Înterupător de alimentare
- ⑧ Lampă de indicare nivel (albastră) (fascicule luminoase) (Consultați paginile 15 și 16.)
- ⑨ Lampă de confirmare cartuș (roșie) (Consultați pagina 16.)
- ⑩ Lampă de notificare/indicare încărcare (roșie) (Consultați pagina 16.)
- ⑪ Orificiu de aer
- ⑫ Priză

C Adaptor de alimentare cu curent alternativ (RE7-87) (Forma adaptorului de alimentare cu curent alternativ diferă în funcție de regiune.)

- ⑬ Adaptor
- ⑭ Fișa de alimentare
- ⑮ Cablu
- ⑯ Fișă aparat

Accesorii


D Cartuș lampă (x1)

Zone de tratament

Aparatul poate fi utilizat pe zonele .



La subsuoară

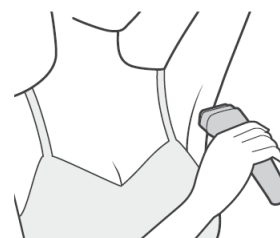


Brațe



Picioare



Linia slipului*

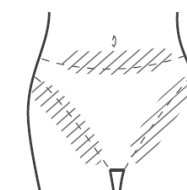

Pentru tratament pe linia slipului, purtați un slip de baie, lenjerie de corp etc. pentru a verifica în prealabil zona de tratament.

Ghid pentru frecvența și durata tratamentului

Frecvența tratamentului

Picioare/Brațe

Utilizați o dată la fiecare 2 săptămâni pentru primele 2 luni.

Utilizați o dată la fiecare 4 săptămâni începând cu a 3-a lună.

Subsuoară/Linia slipului

Utilizați o dată la fiecare săptămână pentru primele 2 luni.

Utilizați o dată la fiecare 2 săptămâni începând cu a 3-a lună.

Ghid pentru tratament



Picioare	Aproximativ 10 minute per sesiune pentru ambele picioare (aproximativ 10 de fascicule luminoase)
Brațe	Aproximativ 5 minute per sesiune pentru ambele brațe (aproximativ 90 de fascicule luminoase)
La subsuoară	Aproximativ 2 minute per sesiune pentru ambele subsuori (aproximativ 30 de fascicule luminoase)
Linia slipului	Aproximativ 2 minute per sesiune (aproximativ 30 de fascicule luminoase)

- Nu utilizați în mod repetat în aceeași zonă și nu utilizați epilatorul IPL mai mult de 3 ori pe săptămână.
Încercați utilizarea aparatului de maximum 2 ori pe săptămână chiar dacă eliminarea părului nedorit nu este imediat evidentă. (Efectele tratamentului pot diferi în funcție de zonă sau specificul corpului.)
- Dacă aparatul nu a fost utilizat pentru o perioadă de timp, reluați utilizarea la aceeași frecvență ca pentru primele 2 luni.
- Durata tratamentului poate diferi în funcție de zonă sau cantitatea de păr, zona de tratament și modul în care aparatul este utilizat.
- Vă rugăm să îndepărtați mai întâi orice păr nedorit din zona de tratament. Vă rugăm să utilizați o lamă de ras separată sau un aparat de ras electric.

- Aparatul diferă de tratamentul de epilare permanentă a părului. Părul nedorit va crește la loc tratat dacă tratamentul este întrerupt.

Încărcare

- 1** Introduceți fișa aparatului ferm în priză de la baza corpului principal.
- 2** Introduceți ferm adaptorul într-o priză de uz casnic.
- 3** Verificați dacă lampa de notificare/indicare a încărcării luminează.

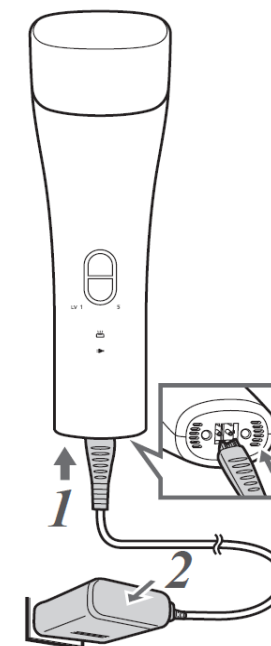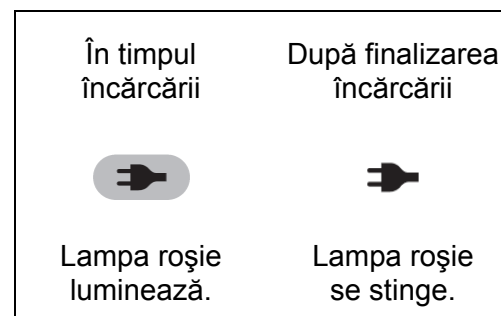

- Durata de încărcare poate diferi atunci când aparatul este utilizat pentru prima dată sau dacă nu a fost utilizat timp de o jumătate de an sau mai mult. Este posibil ca lampa de pe corpul principal să nu lumineze timp de câteva minute după începerea încărcării, dar va lumina dacă încărcarea continuă.
- Încărcarea se finalizează în aproximativ 3 ore.
- Durata de încărcare poate diferi în funcție de capacitatea de încărcare.

<Pentru a verifica dacă încărcarea este completă>

Apăsați comutatorul de pornire cu adaptorul de curent alternativ conectat. Lampa de notificare/indicare încărcare luminează și se stinge după aproximativ 5 secunde.

4 Deconectați adaptorul de la priza de curent electric și decuplați fișa aparatului de la corpul principal.

(pentru siguranță și pentru a reduce consumul de energie)

- Nu vor exista probleme cu corpul principal, chiar dacă este încărcat timp de 3 ore sau mai mult.
- Aparatul poate fi utilizat pentru aproximativ 600 de fascicule luminoase cu o singură încărcare completă.
- Numărul de fascicule luminoase poate diferi în funcție de temperatura ambientală și modul în care este utilizat aparatul.

Note

- Temperatura ambientală recomandată pentru încărcare este între 15 - 35 °C. Încărcarea nu va fi posibilă în afara temperaturii recomandate.
- Încărcarea aparatului la fiecare utilizare nu va afecta durata de viață a bateriei reîncărcabile.
- Dacă apar zgomote perturbatoare la radiourile din apropiere sau la alte dispozitive în timpul încărcării, încărcați aparatul folosind o priză diferită.

Înainte de utilizare

- Nu utilizați aparatul în locuri întunecoase. În caz contrar, pot apărea iritații temporare ale ochilor.
- Vă rugăm să îndepărtați mai întâi orice păr nedorit din zona de tratament.
- Înainte de utilizare, ștergeți orice urme de apă sau transpirație din zona de tratament și orice fire de păr lipite de piele. În caz contrar, murdăria de pe dispozitivul de protecție sau fereastra prin care este emis fasciculul luminos nu va putea fi îndepărtată.

La utilizarea aparatului pentru prima dată

Verificați dacă nivelul de putere este adecvat pielii dumneavoastră.

Setați nivelul de putere la 1 (LV1) și aplicați fasciculul pe zona de tratament o dată.

După 2 zile



Dacă nu apar anomalii ale pielii

Setați nivelul de putere la 1 (LV1) și începeți tratamentul pe zona dorită.

Ghid pentru durata și frecvența tratamentului (Consultați pagina 13.)

După 2 săptămâni




Dacă nu apar anomalii ale pielii

* Pentru subsuoară și linia slipului:
după 1 săptămână

Pentru a mări nivelul de putere pentru tratament, aplicați fasciculul o dată pe zona de tratament și verificați suprafața pielii timp de 2 zile înaintea tratamentului. Măriți nivelul de putere cu o treaptă o dată.

- Dacă apare durere intensă sau iritație a pielii după 2 sau mai multe zile, opriți utilizarea aparatului și consultați un dermatolog.

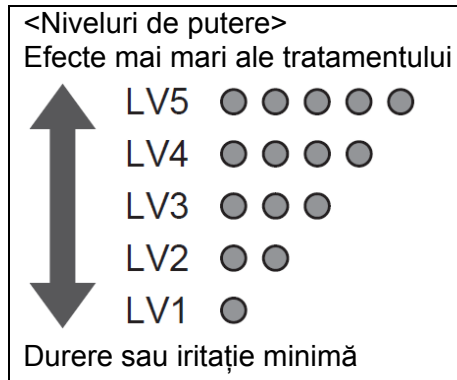

Mod de utilizare

- Aparatul nu pornește chiar dacă apăsați comutatorul, cu adaptorul de alimentare conectat la corpul principal.
- Temperatura ambientală recomandată pentru funcționare este între 5 - 35 °C. Aparatul nu poate fi utilizat în afara temperaturii recomandate.

1 Scoateți capacul.

2 Apăsați și țineți apăsat (timp de aproximativ 3 secunde)

 pentru a porni aparatul.

- Aparatul se va opri automat dacă nu este utilizat timp de aproximativ 1 minut.


3 Apăsați pentru a selecta nivelul de putere.

- Nivelul 1 este selectat atunci când aparatul este pornit.
- Nivelul comută în modul 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 1... de fiecare dată când este apăsat comutatorul de nivel.
- Lampa de indicare a nivelului luminează intermitent și apoi se aprinde. (Este emis un semnal sonor, indicând faptul că pregătirea pentru declanșarea fascicului luminos este încheiată.)

4 Când lampa de indicare a nivelului luminează, aplicați dispozitivul de protecție pe piele și țineți-l apăsat până la fasciculul luminos.

Când aparatul emite un semnal sonor, apăsați capul perpendicular pe piele.

- Utilizați aparatul după ce v-ați asigurat
- că nu se află alte persoane în apropiere.
- Puncte pentru epilarea IPL (Consultați această pagină).
- Când aparatul emite un semnal sonor, pregătirea pentru fasciculul luminos este completă.

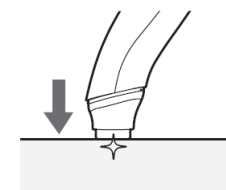



5 Apăsați pentru a opri aparatul.

Puncte pentru epilarea IPL corectă

Punctul 1


Aplicați dispozitivul de protecție perpendicular pe piele și țineți-l apăsat.


Fereastra de fascicul luminos va emite fasciculul luminos doar la aplicarea perpendiculară pe piele.

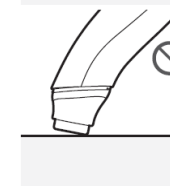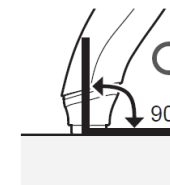


Punctul 2

Mărimea dispozitivului de protecție (partea cu modelul în grilă) reprezintă un ghid pentru intervalul de epilare IPL al fiecărui fascicul luminos.

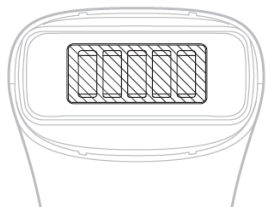


: Interval de epilare IPL al fiecărui fascicul luminos

Când aparatul emite un semnal sonor, pregătirea pentru fasciculul luminos este completă.

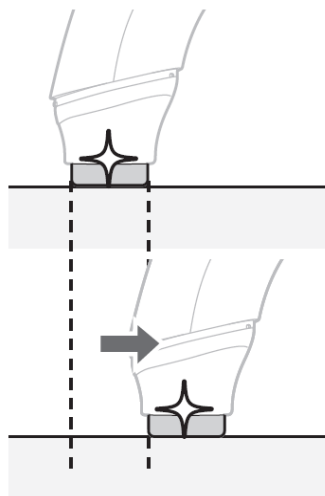

Fascicule luminoase continue

După declanșarea unui fascicul luminos, glisați aparatul la următoarea zonă dorită, în timp ce continuați să-l țineți apăsat pe zona respectivă. Sunt posibile până la 10 declanșări ale fasciculului luminos la un interval de aproximativ 3 secunde.

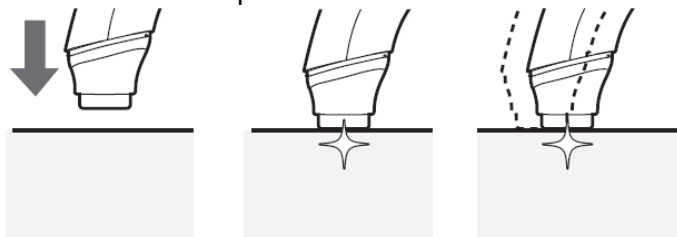

- Nu vor mai fi emise fascicule luminoase după 10 declanșări. Îndepărtați aparatul de piele și încercați din nou.
- Nu utilizați aparatul continuu pe aceeași zonă.

Pentru o piele sănătoasă

Următorul procedeu de îngrijire este recomandat după epilarea IPL.

1. Răciți pielea folosind un prosop înmuiat în apă cu gheață.









2. Umeziți pielea cu loțiune etc.

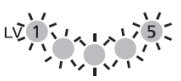


Indicație lampă


► Indicație normală

  	Lampa de indicare a nivelului (albastră) luminează intermitent (o dată/secundă). Imaginea din stânga prezintă selectarea nivelului 5. Pregătire pentru fascicul luminos în curs.
  	Lampa de indicare a nivelului (albastră) luminează. Imaginea din stânga prezintă selectarea nivelului 5. Este posibilă declanșarea fasciculului luminos.


► **Mai puțin de 1000 de fascicule luminoase rămase până la perioada de înlocuire a cartușului lămpii.**

LV 1	5	Lampa de confirmare cartuș (roșie) luminează. Mai puțin de 1000 de fascicule luminoase rămase până la perioada de înlocuire a cartușului lămpii. Pregătiți un nou cartuș de lampă. (Consultați pagina 19.)
		



► **Perioada de înlocuire a cartușului lămpii**


LV 1	5	Lampa de confirmare a cartușului (roșie) luminează intermitent (o dată/secundă), iar aparatul se oprește 5 secunde mai târziu. Epilarea IPL nu este posibilă deoarece cartușul lămpii trebuie înlocuit. Înlocuiți cartușul de lampă. (Consultați pagina 19.)
		

► **Notificare de încărcare**

LV 1	5	Lampa de notificare/indicare încărcare (roșie) luminează intermitent (o dată/secundă). Nivelul bateriei este insuficient. Se recomandă încărcarea.
		

► **Afișare disfuncționalitate**

LV 1	5	[Încărcare anormală] Lampa de notificare/indicare încărcare (roșie) luminează intermitent rapid (de două ori/secundă). Temperatura ambientală recomandată pentru încărcare este 15 - 35 °C. Verificați temperatura încăperii în care este încărcat aparatul și încercați din nou.
		
LV 1	5	[Cartuș] Lampa de confirmare a cartușului (roșie) luminează intermitent rapid (de două ori/secundă), aparatul emite o serie de semnale sonore și apoi se oprește după 5 secunde. Cartușul lămpii nu este atașat corect. Atașați corect cartușul lămpii după ce vă asigurați că aparatul este oprit. (Consultați pagina 19.)
		

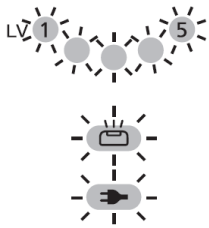	<p>[Alte disfuncționalități]</p> <p>Lampa de indicare a nivelului (albastră), lampa de confirmare a cartușului (roșie) și lampa de notificare/indicare încărcare (roșie) luminează intermitent simultan (o dată/secundă), aparatul emite un semnal sonor de două ori și apoi se oprește după 5 secunde.</p> <p>Temperatura ambientală recomandată pentru funcționare este de 5 - 35 °C.</p> <p>Verificați temperatura încăperii în care va fi utilizat aparatul și porniți-l din nou. (Este posibil ca aparatul să nu se adapteze imediat la temperatura camerei după schimbarea locației.)</p> <p>Dacă acest simptom apare în mod repetat, contactați un centru de service autorizat.</p>
---	---


Curățare

Opriti întotdeauna corpul principal și așteptați 2 - 3 minute înainte de curățare.

► Cadru/fereastră fascicul luminos

Îndepărtați orice obstrucții de pe dispozitivul de protecție sau fereastra fasciculului luminos. În caz contrar, eliminarea murdăriei va fi dificilă, iar intensitatea fasciculului va fi redusă.

1. Îndepărtați cadrul.

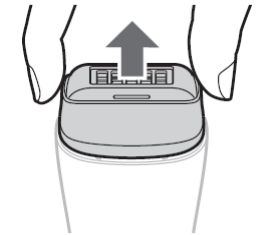

2. Ștergeți cu atenție orice urmă de murdărie, folosind o cârpă uscată.


Fereastră fascicul luminos



Cadru/Dispozitiv de protecție



3. Atașați cadrul.
Introduceți până când auziți un clic.

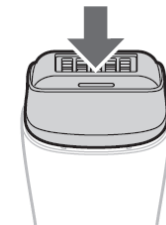

Înlocuirea cartușului lămpii

Un ghid pentru înlocuirea cartușului lămpii este de aproximativ 2 ani atunci când aparatul este utilizat la frecvența și pentru perioada recomandate.

Perioada de înlocuire a cartușului lămpii este de aproximativ 20000 de fascicule luminoase.

Notificare privind perioada de înlocuire

Lampa de confirmare a cartușului (roșie) luminează la pornirea aparatului atunci când au rămas mai puțin de 1000 de declanșări ale fasciculului luminos. Lampa de confirmare a cartușului (roșie) luminează intermitent la pornirea aparatului dacă este momentul înlocuirii cartușului de lampă. (Consultați pagina 17.)

Înlocuirea și resetarea cartușului lămpii


1. Apăsați  pentru a opri aparatul.

2. Scoateți cartușul de lampă.

① Îndepărtați cadrul.



② Scoateți-l trăgând drept în direcția săgeții.

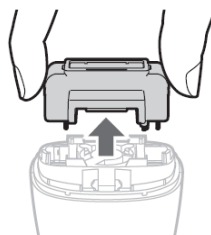


- Nu folosiți un cartuș de lampă care a mai fost utilizat anterior. (Acest lucru ar putea cauza defectarea cartușului lămpii.)

3. Pregătiți un nou cartuș de lampă.


① Introduceți drept în direcția săgeții.


- Introduceți ferm complet.

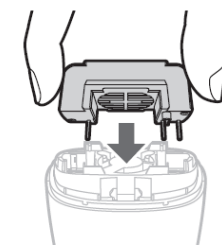

② Atașați cadrul.

Introduceți până când auziți un clic.

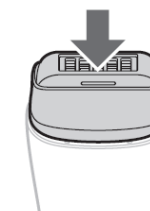

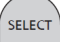4. Apăsați și țineți apăsat (timp de aproximativ 3 secunde)  până când aparatul emite un semnal sonor pentru a-l reseta.

- Înlocuirea este completă dacă lampa de confirmare cartuș (roșie) luminează intermitent de două ori și alarma emite semnale sonore.
- Aparatul va porni doar după finalizarea resetării.

Note

- Resetați întotdeauna aparatul imediat după înlocuirea cartușului lămpii. (Aparatul nu poate fi resetat dacă a trecut prea mult timp de la înlocuirea cartușului lămpii.)
- Dacă operația de resetare nu poate fi finalizată, reîncărcați aparatul, reatașați cartușul de lampă și resetați din nou aparatul.

► Piese de schimb

Piesele de schimb sunt disponibile la distribuitor sau la centrul de service.

Înlocuirea cartușului lămpii

WES2W13

Întrebări și răspunsuri

Întrebare	Răspuns
Ce tip de lumină este emisă prin fereastra fascicului luminos?	► Fascicul luminos instantaneu de la o lampă xenon.
De ce aparatul poate fi utilizat doar de către persoane cu vârsta peste 18 ani?	► Deoarece echilibrul hormonal este instabil în timpul creșterii, iar pielea este foarte sensibilă în acest stadiu.
Aparatul poate fi utilizat și în alte zone decât la subsuoară, pe brațe, picioare sau pe linia slipului?	► Folosiți aparatul doar la subsuoară, pe brațe, picioare sau pe linia slipului. (Nu utilizați aparatul pe față sau în alte zone.)
Aparatul poate fi utilizat zilnic?	► Utilizarea aparatului pe aceeași zonă în fiecare zi nu este recomandată. ► Vă rugăm să urmați ghidul pentru frecvența și durata tratamentului. (Consultați pagina 13.)
De ce apare un miros de ars după declanșarea unui fascicul luminos?	► Deoarece fasciculul luminos încălzește părul nedorit, acest lucru fiind normal. Îndepărtați orice păr care a crescut prea mult. De asemenea, îndepărtați resturile rămase pe piele.
Fasciculul luminos pare foarte puternic la utilizarea aparatului, acest lucru este o problemă?	► Aplicați fasciculul cât mai aproape pe piele. (Consultați pagina 15.) Dacă intensitatea luminii vă deranjează, purtați ochelari de soare sau un alt tip de protecție pentru ochi.

Întrebare	Răspuns
Fasciculul luminos pare foarte cald la utilizarea aparatului, acest lucru este o problemă?	► Senzația este diferită pentru fiecare persoană, dar senzația de fierbinte poate fi mai mare dacă părul nu a fost îndepărtat corect. Vă rugăm să folosiți o lamă de ras pentru a scurta părul înainte de aplicarea fascicului luminos.
Pielea tratată devine roșie în timpul utilizării aparatului; acest lucru reprezintă o problemă?	► Pielea tratată poate deveni temporar roșie sau puteți simți o senzație de durere, în funcție de tipul corpului sau starea persoanei care folosește aparatul.
Durerea și roșeața persistă chiar și după utilizare, acest lucru reprezintă o problemă?	► Opriți imediat utilizarea aparatului și mențineți pielea rece și umedă. Dacă simptomele reapar în interval de 2 zile, folosiți aparatul la un nivel la care acestea nu mai apar. Dacă simptomele persistă după 2 zile, consultați un dermatolog. (Consultați pagina 14.)
Murdăria de pe dispozitivul de protecție nu poate fi îndepărtată.	► Dacă murdăria nu a putut fi îndepărtată complet în timpul curățării, intensitatea luminii va deveni slabă, iar dispozitivul de protecție trebuie înlocuit. Contactați magazinul de unde ați achiziționat unitatea sau un centru de service autorizat de Panasonic pentru reparații. (Parte reparație: ESWH81P3107)

Întrebare	Răspuns
Lampa de confirmare cartuş luminează intermitent când comutatorul selector de nivel este apăsat	▶ Lampa de confirmare cartuş va lumina intermitent când cartuşul lămpii este ataşat/detaşat, dar acest lucru nu reprezintă o defecţiune. Resetaţi aparatul în cazul în care cartuşul lămpii a fost înlocuit. (Consultaţi pagina 19.)

Identificarea și remedierea problemelor

Problemă	Acţiune
Fereastra de fascicul luminos nu emite fasciculul.	▶ Verificaţi dacă lampa de indicare nivel (albastră) a trecut de la iluminare intermitentă la iluminare continuă. ▶ Apăsaţi comutatorul de fascicul luminos perpendicular pe piele până când luminează intermitent. (Consultaţi pagina 15.) ▶ Dacă au fost emise 10 fascicule luminoase, îndepărtaţi temporar aparatul de piele. ▶ Dacă lampa de confirmare cartuş (roşie) luminează intermitent, este momentul înlocuirii cartuşului lămpii. Înlocuiţi cu un nou cartuş de lampă. (Consultaţi pagina 19.)
Durata de pregătire a fasciculului luminos este prea lungă.	▶ Durata de pregătire a fasciculului luminos poate fi mai lungă, pentru a preveni supraîncălzirea corpului principal.
Aparatul s-a oprit după ce toate lămpile au iluminat intermitent și aparatul a emis un semnal sonor de două ori.	▶ Temperatura ambientală recomandată pentru funcţionare este între 5 - 35 °C. Aparatul nu poate fi utilizat în afara temperaturii recomandate. (Consultaţi pagina 18.)

Problemă	Acțiune
Aparatul s-a oprit după ce lampa de confirmare a cartușului (roșie) a luminat intermitent rapid (de două ori/secundă), iar aparatul a emis o serie de semnale sonore.	▶ Cartușul lămpii nu este atașat corect. Atașați cartușul lămpii în mod corect. (Consultați pagina 19.)
Aparatul s-a stins după ce lampa de confirmare cartuș (roșie) a luminat intermitent.	▶ Este momentul înlocuirii cartușului lămpii. Înlocuiți cu un nou cartuș de lampă. (Consultați pagina 19.)
Lampa de confirmare cartuș (roșie) luminează.	▶ Se apropie momentul înlocuirii cartușului lămpii. Pregătiți un nou cartuș de lampă. (Consultați pagina 19.)
Aparatul s-a oprit în timpul utilizării.	▶ Din motive de siguranță, aparatul se va opri automat dacă nu este utilizat timp de aproximativ 1 minut de la pornire. Porniți din nou aparatul.
Aparatul poate fi utilizat doar de câteva ori după încărcare.	▶ Bateria a atins sfârșitul duratei de viață. (Consultați această pagină.)
Aparatul nu funcționează nici chiar după apăsarea comutatorului de pornire.	▶ Apăsați și țineți apăsat comutatorul de pornire (timp de aproximativ 3 secunde) la pornire. ▶ Încărcați aparatul. (Consultați pagina 13.)

Dacă problemele nu au putut fi rezolvate, luați legătura cu magazinul de unde ați achiziționat aparatul sau cu un centru de service autorizat de Panasonic pentru reparare.

Durata de viață a bateriei

Aproximativ 3 ani

Dacă durata de operare este semnificativ mai scurtă după o încărcare completă, bateria a atins sfârșitul duratei de viață.

(Durata de viață a bateriei se poate schimba în funcție de utilizare și condițiile de depozitare).

Bateria din acest aparat nu este destinată înlocuirii de către utilizatori. Aceasta trebuie înlocuită doar de către un centru de service autorizat.


Scoaterea bateriilor reîncărcabile integrate

Scoateți bateriile reîncărcabile integrate înainte de depunerea aparatului la deșeurii.

Vă rugăm să vă asigurați că bateriile sunt depuse la deșeurii în cadrul unei unități special desemnate în acest scop. Această figură trebuie urmată doar la depunerea la deșeurii a aparatului și nu va fi utilizată la repararea lui. Dacă dezamblați dumneavoastră aparatul, acesta se poate defecta.

- Decuplați aparatul de la adaptorul de alimentare cu curent alternativ.
- Dacă aparatul poate fi pornit și emite lumină, utilizați-l până la consumarea completă a bateriei.
- Așteptați cel puțin 10 minute după oprire înainte de dezamblarea aparatului.

- Efectuați pașii ① - ⑥ și ridicați bateria, apoi scoateți-o.
- Asigurați-vă că nu scurtcircuitați bornele pozitivă și negativă ale bateriei scoase și izolați-le aplicând pe acestea bandă.

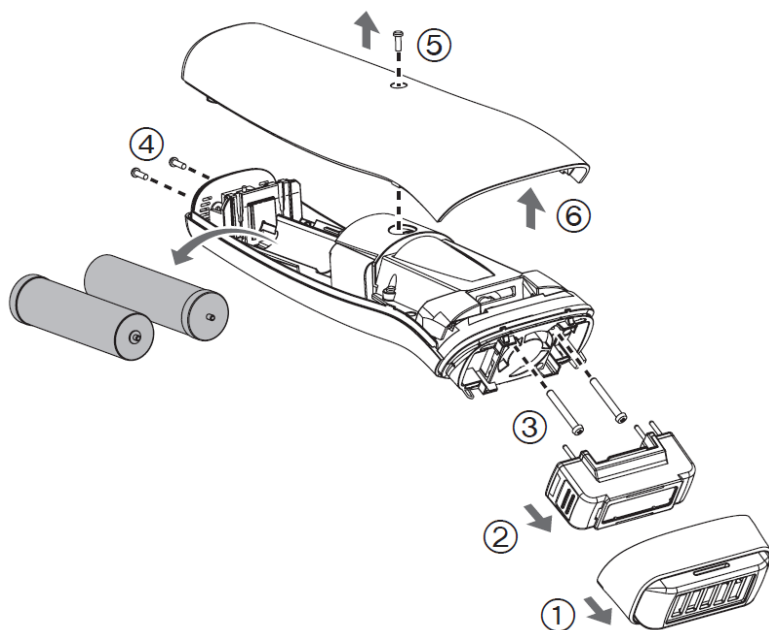

Pentru protecția mediului înconjurător și reciclarea materialelor

Acest aparat conține baterii litiu-ion.

Vă rugăm să vă asigurați că bateriile sunt depuse la deșeurile la un centru de colectare oficial, în cazul în care există unul în țara dumneavoastră.

Specificații

Sursă de alimentare	Consultați plăcuța cu caracteristici tehnice de pe adaptorul de alimentare. (Conversie automată tensiune)
Durată de încărcare	Aprox. 3 de ore
Zgomot acustic în aer	Nivel de putere 5: 45 (dB (A) re 1 pW)

Acest produs este destinat exclusiv uzului casnic.

Depunerea la deșeurile a echipamentelor și a acumulatorilor vechi Doar pentru Uniunea Europeană și pentru țările cu sisteme de reciclare



Aceste simboluri de pe produse, ambalaje și/sau documentele însoțitoare indică faptul că produsele electrice și electronice, precum și acumulatorii uzate nu trebuie să fie amestecate cu deșeurile menajere obișnuite.



Pentru un tratament corespunzător, pentru recuperarea și reciclarea produselor vechi și a bateriilor uzate, vă rugăm să le depuneți la punctele de colectare special amenajate, în conformitate cu legislația națională.

Prin depunerea corespunzătoare a acestora la deșeurile, veți ajuta la economisirea unor resurse valoroase și veți preveni potențialele efecte negative asupra sănătății umane și asupra mediului înconjurător. Pentru mai multe informații despre colectare și reciclare, vă rugăm să contactați autoritățile locale. Este posibil ca eliminarea incorectă a acestor deșeurile să fie pedepsită conform legilor naționale.



Notă pentru simbolul de acumulator (simbolul de jos):

Acest simbol poate fi utilizat în combinație cu un simbol chimic. În acest caz, acesta este conform cu cerințele stabilite de Directivă pentru elementul chimic în cauză.

Produs Panasonic

Acest produs este acoperit de garanția E-Guarantee Panasonic.

Vă rugăm să păstrați chitanța de achiziționare.

Condițiile garanției și informațiile despre acest produs sunt disponibile la www.panasonic.com/ro sau la următoarele numere de telefon: 021 316 3165 / 021 316 4187 - număr pentru apeluri din rețele fixe (terestre)